

- Il **DRI Sleeper**<sup>®</sup> insegna all’utente a svegliarsi nel momento in cui comincia l’orinazione.
- L’utente diventa più sensibile alla sensazione di riempimento della vescica e più sovente si sveglia immediatamente prima o immediatamente dopo l’inizio dell’orinazione.
- L’utente si sveglia al bisogno di urinare ma senza aver orinato.
- L’utente avanza verso uno stadio più maturo in cui riesce a dormire per tutta la notte, e per lo più non deve alzarsi per urinare durante la notte. Per una spiegazione ancora più dettagliata ed ulteriori ricerche vedere www.DRI-Sleeper.com

**Consiglio di funzionamento.** Quando la spina del detector viene inserita nell’apparecchio d’allarme, si accende il ***DRI Sleeper***<sup>®</sup> ed è pronto a reagire all’umidità. Quando la spina del detector viene disinserita il ***DRI Sleeper***<sup>®</sup> si spegne. Di giorno bisogna assicurarsi che la spina del detector viene disinserita perché quando è inserita consuma la batteria (anche se in piccola quantità).

**Metodo d’uso del *DRI Sleeper***<sup>®</sup>

- Per attaccare l’allarme al pigiama: cucire, o fissare con spillo da balia una striscia di “Velcro” sulla spalla e porre l’apparecchio d’allarme del ***DRI Sleeper***<sup>®</sup> su questa striscia di “Velcro”. È meglio se la presa per la spina sull’apparecchio d’allarme sia rivolta verso l’alto. Il filo che collega l’apparecchio d’allarme al detector, va **all’interno** del pigiama e verso il basso fino alla biancheria intima.

**Consiglio di procedimento.** Può accadere che alcuni bambini staccino il detector durante la notte. Sarebbe meglio far scorrere il filo dalla spina verso il basso passando sul dietro dell’apparecchio d’allarme tra le due parti del Velcro aiutando così a tenerlo a posto. Far scorrere il filo dal detector verso l’alto attraverso una delle prime asole del pigiama e dopodiché sarebbe meglio allacciare anche il bottone. Un’altra semplice soluzione è mettere un elastico ben stretto intorno all’apparecchio d’allarme con il filo sotto l’elastico.

2. Il detector viene inserito in un pannolino o assorbente di tipo sottile che viene poi attaccato all’interno del cavallo delle mutandine.

**Nota di procedimento.** Il detector è sensibile all’umidità e può attivarsi se tenuto tra le dita. Ciò è normale.

- Tagliare una fessura negli strati assorbenti del pannolino, inserire la punta delle forbici e fare un piccolo incavo in cui inserire il detector. Per riuscire a tenere il detector all’interno del pannolino, mettere del nastro adesivo sulla fessura.

**Consiglio di procedimento.** Si può anche tagliare un pannolino a metà (trasversalmente) ed inserire il detector. Usando questo metodo usare meno urina per attivare l’allarme.

In caso non vogliate usare un pannolino, il detector può essere messo fra due paia di mutande, o si può cucire una tasca di stoffa nel cavallo delle mutande ed il detector viene inserito nella tasca. La tasca deve essere delle giuste dimensioni per poter tenere ben fermo il detector.

- Seguire questa routine prima di andare a dormire: attaccare l’apparecchio d’allarme del ***DRI Sleeper***<sup>®</sup> sulla spalla, inserire la spina del detector ed attivarlo mettendolo in un contenitore d’acqua, disinserire e fare finta di andare in bagno, tornare, riat-taccare il ***DRI Sleeper***<sup>®</sup> e ripetere per altre 5 volte.

- Quando l’allarme suona, il bambino si sveglia, stacca l’allarme e va in bagno.

**Consiglio di procedimento.** All’inizio del trattamento chi dorme molto profondamente, può non svegliarsi. Ciò **non** significa che il ***DRI Sleeper***<sup>®</sup> non funziona. Col tempo, il bambino “entrerà in sintonia”. Fino ad allora, svegliare il bambino, ma fare staccare l’allarme dal bambino e farlo andare in bagno.

Assicuratevi che il bambino sia completamente sveglio e che il giorno dopo si ricordi di essersi svegliato, di aver udito l’allarme e di essere andato in bagno. Per spiegazioni ancora più dettagliate su come affrontare un sonno molto profondo, vedere anche la pagina FAQ sul sito www.DRI-Sleeper.com

- Lavare SEMPRE bene il detector con detergente (preferibilmente un lavaggio con detergente liquido) dopo ogni notte e sciacquare molto bene ed asciugare con un panno. Se il detergente non viene sciacquato bene il detector può attivarsi. Per sterilizzare, può essere lavato con alcool. Si consiglia vivamente di comprare un detector di scorta e tenerlo pronto per l’uso in un altro pannolino e mutandine.
- CONTINUARE AD USARE ***DRI Sleeper***<sup>®</sup> OGNI NOTTE finché il letto non venga bagnato per 14 notti.
- METTERE ALLA PROVA. Ogni notte prima dell’uso, provare il detector e l’apparecchio d’allarme. Inserire la spina del detector nell’apparecchio d’allarme e vedere che ci siano delle coppie di barre nere sul detector. Queste sono le barre di rivelazione. Inserire lentamente il detector in un contenitore d’acqua calda (la

cosa che più si avvicina all’orina), all’inizio appare solo una coppia di barre e vedere quante coppie di barre nere devono essere inserite prima di attivare l’allarme. Se sono necessarie più di 6 coppie di barre allora bisogna sostituire il detector.

**Ritrovamento di Difetti**

Solitamente l’apparecchio d’allarme non diventa difettoso. Se non si attiva di solito è a causa dell’usura del detector. Così come le cuffie di una radio devono essere sostituite, anche il detector ogni tanto deve essere sostituito.

- Il detector non attiva l’allarme. Pulire il detector con un detergente liquido o con alcool. Se questo non risolve il problema sostituire il detector.
- Pile rugginose. Ciò **non** è causato da pile difettose o che si stanno scaricando, è causato **soltanto** dall’acqua che penetra nella custodia (per esempio durante il lavaggio). Ciò potrebbe avere danneggiato il circuito elettronico e c’è la possibilità che l’apparecchio d’allarme debba essere sostituito. Non è sostituibile sotto garanzia.
- Graduale abbassamento del suono. Normalmente le pile durano parecchi mesi e perdono potenza e volume solo gradualmente. Per sostituire le pile, aprire la custodia inserendo una moneta nella scanalatura sul fondo della custodia e girare per aprire. **Nota bene:** le pile allo zinco non sono adatte, controllare l’interno della custodia per l’uso di pile adatte.
- Improvviso abbassamento del volume (per esempio l’allarme funziona ancora ma ora il volume è basso). Ciò è dovuto ad interferenze dell’utente con il segnale acustico piezo; non è un difetto di fabbrica e non è coperto da garanzia.

Español
<div><b>Le Rogamos Lea Esta Información y La Guarde Para Futura Referencia</b></div> <div> <p>El <i><b>DRI Sleeper</b></i><sup>®</sup> es idóneo para niños de edad superior a 5 años. La gran mayoría de los niños dejan de orinarse en la cama antes de llegar a los 5 años de edad. A partir de esta edad, el niño necesitará ayuda para acabar con este problema. Es posible que en ocasiones el problema se produzca como resultado de algún tipo de trastorno, pero por lo general la causa principal se centra en una falta de aprendizaje ajena a la voluntad del niño y de la que éste no es nunca culpable. La duración del tratamiento efectivo con la ayuda de <i><b>DRI Sleeper</b></i><sup>®</sup> varía desde unas pocas semanas hasta varios meses. La constancia es la clave del éxito en todos los casos. En caso de recaída, un nuevo tratamiento de corta duración es por lo general suficiente para conseguir el objetivo deseado. <b>Anime Siempre al Niño.</b></p> <p>El <i><b>DRI Sleeper</b></i><sup>®</sup> no debe ser manejado nunca como si fuera un juguete. Cuando no se utilice, guárdelo siempre en lugar seguro para evitar interferencias.</p> <p><b>Descripción.</b> El <i><b>DRI Sleeper</b></i><sup>®</sup> consta de dos partes diferenciadas: la unidad de alarma y el detector. La caja de la alarma se coloca en el hombro, el detector se conecta a la caja de alarma de manera que la pieza del detector quede por dentro de la prenda interior y consiga así reaccionar eficazmente ante la presencia de orina y dispare la alarma. <b>Fases del tratamiento.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>El <i><b>DRI Sleeper</b></i><sup>®</sup> enseña al usuario a despertarse tan pronto como se detecta la presencia de orina.</li> <li>El usuario se vuelve más sensible a la sensación de tener la vejiga llena y, de esta manera, se despierta cada vez más regularmente justo antes o justo después de que aparezca la orina.</li> <li>El usuario se despierta al sentir la necesidad de orinar antes de que la orina aparezca.</li> <li>El usuario avanza hacia una pauta de comportamiento más adulto y ya es capaz de dormir durante toda la noche sin necesidad de levantarse para ir a orinar. Si desea una explicación más detallada del proceso en base a las investigaciones efectuadas en la materia, visite nuestra página web www.DRI-Sleeper.com</li></ol> <p><b>Consejo sobre el manejo.</b> Cuando el detector est* conectado a la caja de la alarma, ésta enciende el <i><b>DRI Sleeper</b></i><sup>®</sup> a fin de que éste esté listo para reaccionar al detectar señales de humedad. El <i><b>DRI Sleeper</b></i><sup>®</sup> se apaga cuando se desconecta el detector. Durante el día, asegúrese de que el detector está desconectado para no malgastar la pila, por poco que consuma.</p> <p><b>Método para el uso de <i>DRI Sleeper</i></b><sup>®</sup></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Para adherir la alarma a los pijamas: cosa el Velcro o engánchelo con un imperdible al hombro y coloque la caja de alarma del <i><b>DRI Sleeper</b></i><sup>®</sup> sobre el parche del Velcro. Se recomienda que la toma del enchufe mire hacia arriba. El cable de la caja de alarma que la conecta con el detector deberá pasar <b>por dentro</b> de los pijamas hasta llegar a la prenda interior del niño.</li></ol> <p><b>Consejo sobre el procedimiento.</b> Se puede dar el caso de que el niño desconecte el detector durante la noche. Para intentar evitar que esto ocurra, haga pasar el cable del enchufe de arriba a abajo por la parte</p></div>

posterior de la caja de la alarma y entre las dos partes del Velcro, lo que ayudará a que el cable se mantenga en posición haciendo más difícil la desconexión. Pasar el cable del detector a través del ojal superior de los pijamas y abotonarlo a continuación puede ser una opción útil. Otra sencilla solución consiste en utilizar una goma elástica apretándola bien alrededor de la caja de alarma y con el cable pasando entre ésta y la goma.

- Se coloca el detector dentro de una compresa a fin de que quede bien fijo dentro de la base de la prenda interior del niño.

**Nota sobre el procedimiento.** El detector es sensible a la humedad, por lo que podría soltar la alarma mientras es manipulado con los dedos. Esto es normal.

- Haga un pequeño corte en las capas absorbentes de la compresa, inserte la punta de las tijeras haga un agujero para introducir el detector. Para conseguir que el detector se quede encajado en el interior de la compresa, pegue una cinta adhesiva sobre el corte.

**Consejo sobre el procedimiento.** Compruebe si es posible cortar una compresa en dos partes (transversalmente) e insertar el detector. Con este método se necesitará una cantidad menor de orina para que se dispare la alarma.

Si no quiere usar una compresa, entonces puede colocar el detector entre dos unidades de ropa interior, o coser un bolsillo de tela dentro de la parte de la base de la prenda interior para insertar el detector. El tamaño del bolsillo debe permitir que el detector se quede bien encajado.

- Siga los siguientes pasos antes de meter al niño en la cama: adhiera el ***DRI Sleeper***<sup>®</sup> al hombro, conecte el detector y póngalo en un recipiente con agua para hacer sonar la alarma; seguidamente desconéctelo y pretenda que va al cuarto de baño; entonces regrese, vuelva a colocar el ***DRI Sleeper***<sup>®</sup>; repita estos pasos 5 veces más.
- Cuando suena la alarma, el niño se despierta, desconecta la alarma y se dirige al cuarto de baño.

**Consejo para el procedimiento.** Durante los primeros días del tratamiento, podría darse el caso de que los niños de sueño mas profundo no se despierten, pero ello **no** significa que el uso del ***DRI Sleeper***<sup>®</sup> no vaya a tener éxito. Con el paso del tiempo, el niño aprenderá a sintonizarse. Mientras tanto y hasta que esto ocurra, despierte a su hijo, pero haga que éste desconecte la alarma y vaya seguidamente al cuarto de baño. Asegúrese de que su hijo se halle totalmente despierto para que pueda así, a la mañana siguiente, recordar haberse despertado, oído la alarma e ido al cuarto de baño. Si desea información aún más detallada en cuanto al enfoque utilizado con niños con dificultades para despertarse de su sueño, visite la página de preguntas más frecuentes (FAQ) de nuestro sitio web www.DRI-Sleeper.com

- Lave **siempre** a fondo el detector con jabón (mejor si es un detergente de jabón líquido) después de cada noche, aclárelo bien con agua y séquelo con un pañuelo de papel. Si no se aclarara bien el jabón, el detector podría disparar la alarma. Puede lavarse con alcohol a efectos de esterilización. Se recomienda adquirir un detector de repuesto y tenerlo listo para su uso inmediato en una compresa y ropa interior y nuevas.

- Siga usando *DRI Sleeper***<sup>®</sup> **cada noche** hasta que el niño deje de mojar la cama durante 14 noches consecutivas .
- Prueba de funcionamieno.** Pruebe el detector y la caja de la alarma todas las noches antes de usarlos. Conecte el detector a la caja de la alarma y asegúrese de que aparecen varios pares de barras negras en el detector (las barras de detección). Empezando sólo con un par de barras, introduzca lentamente el detector en un recipiente con agua caliente (el tipo de líquido más parecido a la orina) y compruebe cuántas barras son necesarias para que se dispare la alarma. Si se necesitan más de 6 barras, entonces es hora de cambiar el detector.

**Localización de Fallos**

No es normal que la unidad de alarma se averíe. Los fallos de accionamiento de la alarma se deben por lo general al desgaste normal del detector. Al igual que ocurre con los audífonos de un aparato de radio, el detector también requiere ser cambiado de vez en cuando.

- El detector no dispara la alarma: limpie el detector con jabón líquido o alcohol. Si esto no soluciona el problema, cambie el detector por uno nuevo.
- Pilas oxidadas: la aparición de óxido no se debe a que las pilas sean defectuosas ni a que estén gastadas, sino **únicamente** a la entrada de agua en la caja (por ejemplo, durante el lavado). Es posible que el agua haya dañado el circuito electrónico. Si es así, se tendrá que reemplazar la unidad de alarma. El recambio no está cubierto por la garantía.
- Reducción paulatina del volumen. Las pilas de calidad estándar duran varios meses y sólo pierden fuerza y el volumen decrece de manera paulatina. Para cambiar de pilas, abra la tapa que se

encuentra en la parte inferior de la cajetilla haciendo girar la ranura con una moneda. **Nota:** las pilas de Zinc-Aire no son idóneas para esta unidad; mire en el interior de la cajetilla para informarse del tipo correcto de pila .

- Reducción repentina del volumen (por ejemplo, la alarma aún funciona pero a bajo volumen). Esto puede ser debido a la manipulación del zumbador piezoeléctrico por el usuario. Al no tratarse de un defecto de fabrica, este caso no está cubierto por la garantía.

Danskt
<div><b>Læs Og Gem Venligst Denne Information</b></div> <div> <p><i><b>DRI Sleeper</b></i><sup>®</sup> er velegnet til børn over 5 år. De fleste børn stopper som sengevædere når de kommer i fem års alderen. Er dette ikke tilfældet vil hjælp være at foretrække. I enkelte tilfælde kræves der medicinsk behandling, men i lang de fleste tilfælde skyldes sengevædning en indlæringsfejl. En succesfuld behandling med <i><b>DRI Sleeper</b></i><sup>®</sup> tager fra få uger til få måneder. Udholdenhed er nøglen til en succesfuld behandling. Hvis der på et senere tidspunkt sker et tilbagefald kan der som regel rettes op på det ved en kortvarig behandling. <b>Opmuntring Er Vigtigt.</b></p> <p><i><b>DRI Sleeper</b></i><sup>®</sup> må ikke anvendes som legetøj og bør altid gemmes væk når den ikke er i brug.</p> <p><b>Beskrivelse.</b> <i><b>DRI Sleeper</b></i><sup>®</sup> består af to dele, alarm og detector. Alarmen anbringes ved skulderen og detectoren tilsluttes alarmen. Detectoren placeres i underbukserne og vil reagere på urin som vil udløse alarmen.</p> <p><b>Behandlingsforløb</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i><b>DRI Sleeper</b></i><sup>®</sup> hjælper brugeren til at vågne op når personen begynder at urinere.</li> <li>Der opnås en bedre følelse af hvornår urinblæren er fyldt op og brugeren vil ofte vågne op inden personen urinere.</li> <li>Brugeren vågner af sig selv med en trang til at urinere uden alarmen er gået i gang.</li> <li>Brugeren vil ofte ikke behøve at stå op om natte for at urinere, men opnår en rytme der sikre en fuld og tør nattesøvn. En mere detaljeret forklaring kan findes på www.DRI-Sleeper.com</li></ol> <p><b>Bruger tip.</b> Når detectoren er tilsluttet alarmen tændes apparatet automatisk og er parat til at måle fugtigheden. Når detectoren er frakoblet slukkes apparatet automatisk. Et godt råd er altid at sørge for at detectoren er frakoblet når apparatet ikke er i brug. Dette vil mindske batteriforbruget (selvom dette er lavt).</p> <p><b>Vejledning ved brug af <i>DRI Sleeper</i></b><sup>®</sup></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Den medfølgende "Velcro" bruges til at fastgøre alarmen. Sy alarmen fast eller brug en sikkerhedsnål til at fastgøre "Velcro" til pyjamasens skulder. Alarmen placeres herefter på "Velcro". Det er bedst hvis stikket på alarmen vender opad. Ledningen der tilsluttes detectoren føres <b>under</b> pyjamassen og ned til underbukserne.</li></ol> <p><b>Procedure tip.</b> Det kan forekomme at barnet i løbet af natten få revet detectoren ud af alarmen og dermed får slukket for systemet. Det kan være en fordel at føre ledningen bagom alarmen og gennem "Velcro". Yderligere sikring kan ske ved at føre ledningen op gennem øverste knaphul der efterfølgende lukkes som normalt. Alternativt kan man ligge en elastik rundt om alarmen og føre ledningen ind under elastikken. <li>Detektoren placeres inde i et bind/ble og puttes derefter i underbukserne.</li> <p><b>Procedure note.</b> Detectoren reagerer på fugt og kan udløses ved simpel berøring med fingerne. Dette er normalt.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Lav et lille snit i det absorberende lag i bindet/bleen, brug en saks til at lave et hulrum hvor detectoren kan placeres. For at sikre fastgørelsen af detectoren anbefales det at lukke hullet med tape.</li></ol> <p><b>Procedure tip.</b> Alternativt kan bindet/bleen klippes i 2 dele (på langs) hvorefter detectoren sættes igennem. Dette resultater i at mindre fugt skal til for at udløse alarmen.</p> <p>Ønsker man ikke at benytte et bind eller en ble kan man med fordel placere detectoren imellem 2 par underbukser. Alternativt kan man sy en lomme på indersiden af underbukserne der passer præcist til detectoren.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Indøv denne rutine hver aften: fastgør <i><b>DRI Sleeper</b></i><sup>®</sup> alarmen til skulderen og tilslut detectoren. Udløs alarmen ved at sætte detectoren i et glas vand, afbryd alarmen og lad som om i går på toilettet, vend tilbage til soveværelset, genplacer <i><b>DRI Sleeper</b></i><sup>®</sup>. Gentag denne øvelse 5 gange eller indtil der er opnået en rutine.</li> <li>Når alarmen udløses og barnet vågner slukkes alarmen og barnet følges til toilettet.</li></ol> <p><b>Procedure tip.</b> I begyndelsen af behandlingen kan det forekomme at et barn der sover meget tungt, ikke vågner nå alarmen udløses. Dette betyder <b>ikke</b> at DRI <i><b>DRI Sleeper</b></i><sup>®</sup> ikke vil give en succesfuld behandling. Med tiden vil barnet lære at vågne. Indtil da, må forældrene vække</p></p></div>

barnet, men det er vigtigt at barnet selv frakobler alarmen og går på toilettet. Sikre jer at barnet er helt vågen. Det er vigtigt for succes i den fremtidige behandling. Yderligere information om behandling af personer der sover tungt kan findes på vores hjemmeside www.DRI-Sleeper.com

- Vask altid** detectoren grundigt i sæbe (sæbevand anbefales) efter hver nat. Skyl grundigt efter med vand og tør efter med et visk-estykke. Hvis sæben ikke skylles helt af kan det medføre at alarmen udløses. Detectoren kan steriliseres ved brug af sprit. Det anbefales at bestille en ekstra detector i reserve for at undgå unødige pauser i behandlingen.
- Fortsæt brugen af *DRI Sleeper***<sup>®</sup> indtil der er opnået 14 dage uden sengevædning.
- Test af ***DRI Sleeper***<sup>®</sup>. Hver nat inden brug bør både detector og alarm testes. Tilslut detectoren til alarmen og se efter om der vises 3 par sorte felter på detectoren. Dette er detector felterne. Nedsænk langsomt detectorens første par felter i et glas vand (lunkent vand ligner urin bedst) og test hvor mange felter der skal nedsænkes får alarmen udløses. Hvis der skal mere end 6 par felter til at udløse alarmen er det nødvendigt at erstatte detectoren med en ny.

**Føjfinding**


Alarmenheden går normalt ikke i stykker. Eventuelle fejl vil oftest skyldes detectoren, hvilket forårsages af normal slidtage. Detectoren kan sammenlignes med et sæt høretelefoner (til en radio) der ligeledes udskiftes oftere end selve radioen.

- Detectoren giver ingen alarm. Prøv at rengøre detectoren i sæbevand eller sprit. Hvis dette ikke afhjælper problemet skal detectoren udskiftes.
- Rustne batterier. Dette skyldes **ikke** forkerte eller udbrændte batterier, men **kun** at vand/fugt er trængt ind i kassen (f.eks. under vask). Der vil i dette tilfælde være en stor risiko for at selve elektronikken er blevet ødelagt og alarmen bør derfor udskiftes. Dette dækkes **ikke** af garantien.
- Gradvis nedsættelse af lydstyrken. Normalt vil batterierne holde i flere måneder, men batteristyrken aftager med tiden og kan være skyld i tab af lydstyrke. Batterierne udskiftes ved at åbne bunden af kassen med en mønt. Mønten drejes indtil kasse åbnes. **Note:** Zink batterier kan ikke anvendes, se indersiden af kassen for korrekt batterivalg.
- Pludselig nedsættelse af volumen (alarmen virker stadig, men volumen er lav). Dette skyldes forstyrrelse af summeren enten af brugeren eller apparatet i nærheden. Der er således ikke tale om en fabriktionsfejl og derfor dækkes dette tilfælde ikke af garantien.

<div><b>DRI Sleeper</b><sup>®</sup> <i>excel</i></div> <div><i>By Anzacare</i></div>	
<div><b>Manufacturer</b> Anzacare Ltd PO Box 400 Waikanae 5250, New Zealand</div>	<div><b>CE</b></div>

**www.DRI-Sleeper.com**

V8/1/13

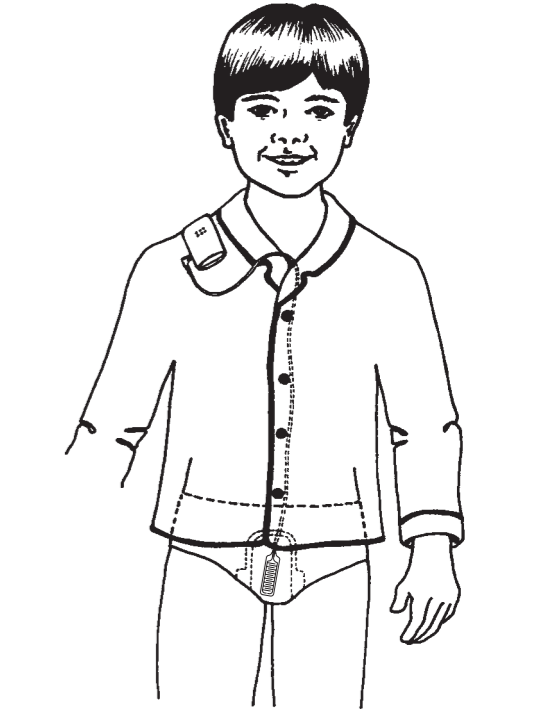

**www.DRI-Sleeper.com**

**Please Read This Information and Keep for Further Use**
***DRI Sleeper***<sup>®</sup> is suitable for children over the age of 5 years. Most children stop bedwetting by 5 years. Beyond this age, help to become dry may be needed. Occasionally a medical disorder may be present, but mostly it is due to an involuntary failure of learning; the child is not to blame. Successful treatment with ***DRI Sleeper***<sup>®</sup> takes from a few weeks to a few months. Persistence is the key to success. If relapse occurs, another short course will usually succeed. **Always Encourage.**

The ***DRI Sleeper***<sup>®</sup> is not a toy to be played with and when not being used it should be put away to prevent interference.

**Description.** The ***DRI Sleeper***<sup>®</sup> has two parts, the alarm unit and the detector. The alarm box goes on the shoulder and the detector plugs into the alarm box with the detecting part going inside the underwear to react to urine, and to trigger the alarm.

**Stages of Treatment**

- The ***DRI Sleeper***<sup>®</sup> teaches the user to wake up as urination begins.
- The user becomes more sensitive to the sensations of the bladder filling up, and more often wakes up just before or just after urination starts.
- The user wakes up to the need to urinate but with no urine having been passed.
- The user progresses to the more mature pattern of being able to sleep through the night, and mostly does not have to get up to urinate during the night. For an even more detailed explanation and research see www.DRI-Sleeper.com

**Operation tip.** When the detector is plugged into the alarm box this switches the ***DRI Sleeper***<sup>®</sup> on to be ready to react to moisture. When the detector is unplugged this switches it off. During the day make sure that the detector is unplugged because when plugged in it is using battery power (although it is a very small amount).

**Method of Using *DRI Sleeper***<sup>®</sup>

- To attach the alarm to the pyjamas: sew, or safety pin the “Velcro” on to the shoulder and place the ***DRI Sleeper***<sup>®</sup> alarm box on the “Velcro” patch. It is best if the socket for the plug on the alarm box faces upwards. The wire from the alarm box which connects it to the detector, goes **inside** the pyjamas and down to the underwear. ➔

